

Pumpenspezifikationen

Gewicht: 499 g
Maße: L: 140 mm x B: 140 mm x H: 62 mm
Akkutyp: Lithiumionen
Akkuladezeit: ≤ 6 h

Nutzungsdauer des Akkus: 24 h bei 125 ml/h
Geräteklassifikation: Klasse IIa
Gehäuse-Schutzart: IP25
Wartung: 5-Jahre-Wartungsintervall

Compat Ella® Produktpalette

Bestelleinheit

- Compat Ella® Pumpe
- Netzstromkabel
- Schraubhalterung
- Gebrauchsanweisung

Überleitsets

- Compat Ella® Pump Set Spike
- Compat Ella® Combiset 1,5 L

Zubehör

- PDMS-Kabel
- Schwesternruf-Kabel

Lernen Sie Compat Ella® online kennen

Internetseite: www.nestlehealthscience.at
Training Center: www.trainingcentre.compatella.com

„Eine interaktive und einladende Art zu lernen, wie Compat Ella® angewendet wird. Lernen und üben Sie mithilfe von Videos, Tutorials und praktischen Übungen, in 7 Sprachen.“

Bestellinformationen

Beschreibung	Artikelnummer	Bestelleinheit / Karton
Compat Ella® Pumpe	12272020	1 Stück
Compat Ella® Pump Set Spike	12272002	30 Stück
Compat Ella® Combiset 1,5 L	12272021	30 Stück
Compat Ella® Schwesternruf-Kabel	12279521	1 Stück
Compat Ella® PDMS-Kabel	12277770	1 Stück

*Weitere Details in der Compat Ella® Gebrauchsanweisung oder auf Anfrage.
Compat Ella® Überleitset ist patentrechtlich geschützt, die Patente sind unter www.compatella.com/patent aufgeführt.

* Sofern nicht anders angegeben, gehören alle Markennamen der Société des Produits Nestlé S.A. oder werden mit Genehmigung verwendet.

¹ Bioinformatics assistance of metabolic and nutrition management in the ICU Mette M. Berger and Yok Ai Que
Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care 2011, 14:202-208. / Impact of a computerized information system on quality of nutritional support in the ICU Nutrition Mette Berger et al 22 (2006) 221-229 /
Strack van Schijndel et al Computer-aided support and nutrients in the ICU. The Netherlands Journal of Medicine
Dezember 2009, vol. 67, no 11: 388-393

Nestlé Österreich GmbH, Nestlé Health Science
Am Euro Platz 2 | A-1120 Wien
Infoline: + 43 1 546 40 734
bestellung.nhs@at.nestle.com
www.nestlehealthscience.at

NestléHealthScience
Compat ella®

NestléHealthScience

Compat ella®

Mobile enterale Ernährungspumpe

Stand 02/2016

Kennen Sie Compat Ella®?

SIE KANN ENTERALE ERNÄHRUNG VEREINFACHEN.



Zuverlässige Verabreichung

- +/- 5% Fördergenauigkeit in jeder Position und Lage
- **AAFF Technologie:** Kassettenbasierter Auto-Anti-Free-Flow, der immer aktiv ist



Alarmer, die Sie sehen können

- **Farbkodierte, leicht erkennbare Symbole und Text** helfen, ein Problem rasch zu lösen
- **Separate Alarmer** für „Luft im Set“, Okklusion in Zu- und Abfluß
- Individuelles Display für jeden Alarm



Wahlmöglichkeiten für Ihren Patienten

- **Kontinuierliches oder Intervall-Programm**
- Förderrate von 1 bis 600 ml/h; in 1-ml/h-Schritten
- Mit oder ohne Zielvolumenvorgabe von 1 bis 4000 ml; in 1-ml-Schritten



Nehmen Sie Compat Ella® einfach mit

- **Der Akku reicht den ganzen Tag** bei einer Förderrate von 125 ml/h
- **Die kleine und leichte Compat Ella®** passt in den praktischen Compat Ella® Rucksack für Kinder und Erwachsene



Compat Ella® Überleitsets

- **AAFF Technologie** (Auto-Anti-Free-Flow) im Überleitset
- Pump Set Spike mit ENPlus, Luer- und abschraubbarem ENLock-Anschluss
- Combiset mit 1,5-Liter-Leerbeutel




Individuell einstellbar

- **Alarmlautstärke und Hintergrundbeleuchtung** sind leicht einstellbar



Informationen auf Tastendruck

- **Der 30-Tage-Ernährungsverlauf** erlaubt eine langfristige, präzise Überwachung der tatsächlich verabreichten Mengen
- Separate Informationen über das aktuelle verabreichte Volumen und das Gesamtvolumen

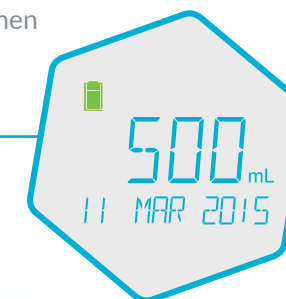

Nachruhe für die Patienten

- **Der Applikationsende-Alarm kann leicht ausgeschaltet werden**, damit die Patienten ruhig schlafen können



Leichte Reinigung

- **Compat Ella® kann einfach unter fließend warmen Wasser gereinigt werden**
- Eine Auswahl an Desinfektionsmitteln kann ebenfalls verwendet werden, so ist es noch hygienischer*



Sprachen zur Auswahl

- **Wenn die Sprache im Display verständlich ist, lässt sich das Gerät auch richtig bedienen:** Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und viele weitere Sprachen



Sichere Anwendung

- **Die Tastensperre** verhindert, dass unabsichtlich auf die Tasten gedrückt wird
- **Applikationsvorgaben-Sperre**, dass keine versehentlichen Veränderungen an den Einstellungen vorgenommen werden können



Verbunden sein

- **PDMS**** erleichtert die Ernährungsüberwachung von Intensivpatienten
- Die automatische Nachverfolgung der Nahrungsaufnahme kann die enterale **Ernährung des Patienten verbessern** und so den **Pflegeaufwand reduzieren**¹
- **Die Schwesternruf-Funktion** verkürzt die Reaktionszeit des Pflegefachpersonals



Lernen Sie Compat Ella® kennen.

SIE KANN ENTERALE ERNÄHRUNG VEREINFACHEN.